

installation


Step 1 / Schritt 1



Lay out main section. Insert the bar in to the two inner holes as shown.

Führen Sie die Stangen in die inneren Öffnungen des Rückenteils ein. (siehe Abb.)

Step 2 / Schritt 2

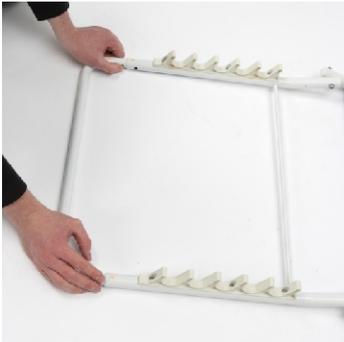

Line up the bottom tubing so the YELLOW markers meet. Insert the tubing until the button clicks.

Legen Sie das Grundgestell so aus, dass es mit den gelben Markierungen übereinstimmt. Führen Sie nun die Rohre ein bis sie einrasten.

Step 3 / Schritt 3



Line up the middle tubing so the BLACK markers meet. Insert the tubing until the button clicks.

Richten Sie nun den mittleren Verstellarm nach der schwarzen Markierung aus und führen Sie ihn bis zum einrasten ein.

Step 4 / Schritt 4



Line up the top tubing so the RED markers meet. Insert the tubing until the button clicks.

Richten Sie das obere Querrohr an den roten Markierungen aus. Führen Sie es bis zum einrasten ein.

To adjust the angle:

Lift up the top tube of the backrest until the backrest is at the required angle. Position the cross bar in to one of the plastic grooves to secure.

To fold the backrest:

Lift up the top tube of the backrest, then remove the cross bar from the plastic groove and fold flat.


Einstellen des Winkels:

Heben Sie die Stütze am oberen Querrohr leicht an und schieben Sie sie nach vorn bis zum gewünschten Winkel. Stellen Sie nun den Verstellarm in die gewünschten Plastikarretierung. Die Stütze steht nun fest.

Falten der Rückenstütze:

Durch das Anheben des oberen Querrohrs lösen Sie den Verstellarm aus der Plastikarretierung. Klappen Sie den Verstellarm an die Rückenlehne. Nun können Sie die Rückenstütze flach zusammenfalten.

instructions

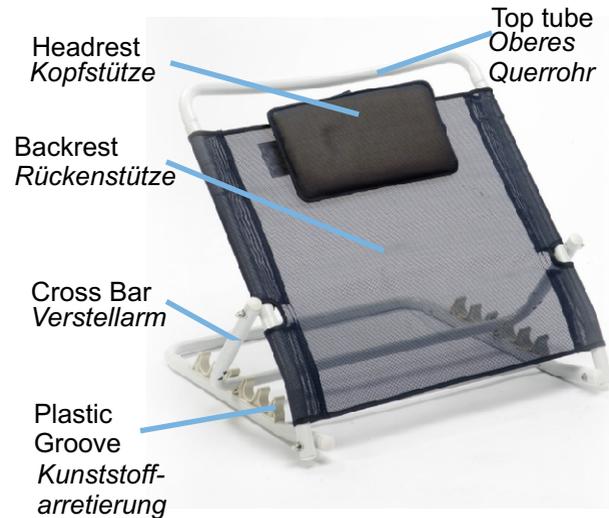

cleaning

The bed backrest can be cleaned using a damp cloth or mild detergent. Do not use abrasive or aggressive cleaning products as this could cause damage or irritation.

Zur Reinigung verwenden Sie haushaltsübliche Reinigungsmittel oder ein feuchtes Tuch. Vermeiden Sie aggressive oder scheuernde Mittel. Dies kann zur Beschädigung des Produktes führen.

specification / technische daten

Folded dimensions (L x W x H):
61 x 63 x 10cm / 24" x 25" x 4"

Maximum weight capacity 120kg (19 stone)

Angle adjustable from 0° to 90°.

Faltmaße (L x B x H)
61 x 63 x 10cm / 24" x 25" x 4"

Maximale Belastbarkeit 120kg (19 stone)

Winkel einstellbar von 0° bis 90°

garantiebestimmungen

Wir übernehmen für Ihr Drive Markenprodukt die Garantie auf Material und Fertigung für den Zeitraum von zwei Jahren ab Kauf.

Dieses Produkt wurde nach definierten Standards gefertigt und sorgfältigen Prüfungen unterzogen. Unser Garantieversprechen an unsere Kunden ist ein Ausdruck unseres Vertrauens in Material und Fertigung unserer Produkte

Im Garantiefall stellen wir Ersatzteile zur Verfügung oder tauschen das gesamte Produkt aus.

Die Garantieleistung entfällt bei Fehlbedienung durch den Benutzer, Fahrlässigkeit oder üblichem Verschleiß. Sie beinhaltet ebenfalls nicht den Ersatz von Verschleißteilen wie z.B. Gummiteilen, Rollen und Griffe, die im Benutzungsfall regelmäßig gewechselt werden müssen.

Falls Sie Fragen zu unseren Garantiebestimmungen haben kontaktieren Sie bitte unsere Fachhändler

warranty details

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for two years from date of purchase.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the customer.

In the event of a defect covered by this warranty, we will at our option supply parts or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, castors and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have any queries or require full warranty conditions, please contact your Drive stockist.

drive

Drive Medical Ltd

Ainley's Industrial Estate, Elland,
West Yorkshire, GB Hx5 9JP
www.drivemedical.co.uk

Doc code: BB001KDR_IFU (Iss 3/12)

bed backrest Rückenstütze

drive

www.drivemedical.co.uk